

ARQ



C **ASME** [®] US



NFPA
99
2015 Edition



ISO
*
ISO 11197:2016

Estructura

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- **Estructura:** Fabricada en perfiles de extrusión especial de aluminio aleación 6063 Temple 5 cumple con ASTM B221-02/AA.
- **Paneles frontales:** Fabricados en perfiles de extrusión especial de aluminio aleación 6063 Temple 5 cumple con ASTM B221-02/AA.
- **Rieles superior e inferior opcionales:** Para soporte y deslizamiento de equipo médico auxiliar, fabricados en perfiles de extrusión especial de aluminio aleación 6063 Temple 5 cumple con ASTM B221-02/AA


ACABADOS

- **Estructura:** Anodizado natural Mate a 10 micras o Pintura electrostática en polvo horneada.
- **Panel Frontal:**
 - 1) Perfil de aluminio con acabado en pintura electrostática en polvo horneada o sublimado de imitación madera.
 - 2) Laminado Plástico decorativo sobre un panel de madera comprimida MDF de 16 mm de espesor con acabado posterior del panel en laminado fenólico o lámina de aluminio calibre 12 como retardante al Fuego.

MÓDULO DE ILUMINACIÓN DE PACIENTE


Tubos tipo T8 de iluminación por LEDs de 60cm de longitud, alimentación eléctrica de 110-220v 60-50hz para **módulo superior** (iluminación de ambiente) e **inferior** (iluminación de lectura), tapas de lámpara fabricadas en Perfiles de extrusión especial de policarbonato transparente con guías luminosas ensambladas a presión.

Incluye interruptores eléctricos para controlar encendido y apagado del módulo de iluminación.

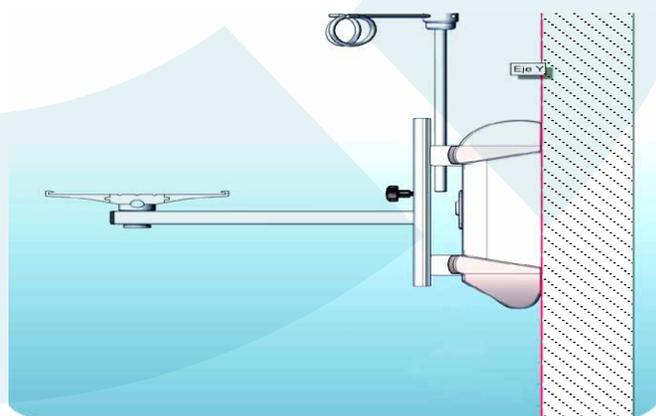

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 (Instalador de Sistemas de gases médicos) y ASME BRAZER IX (Soldador calificado en oxi-acetileno)

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.

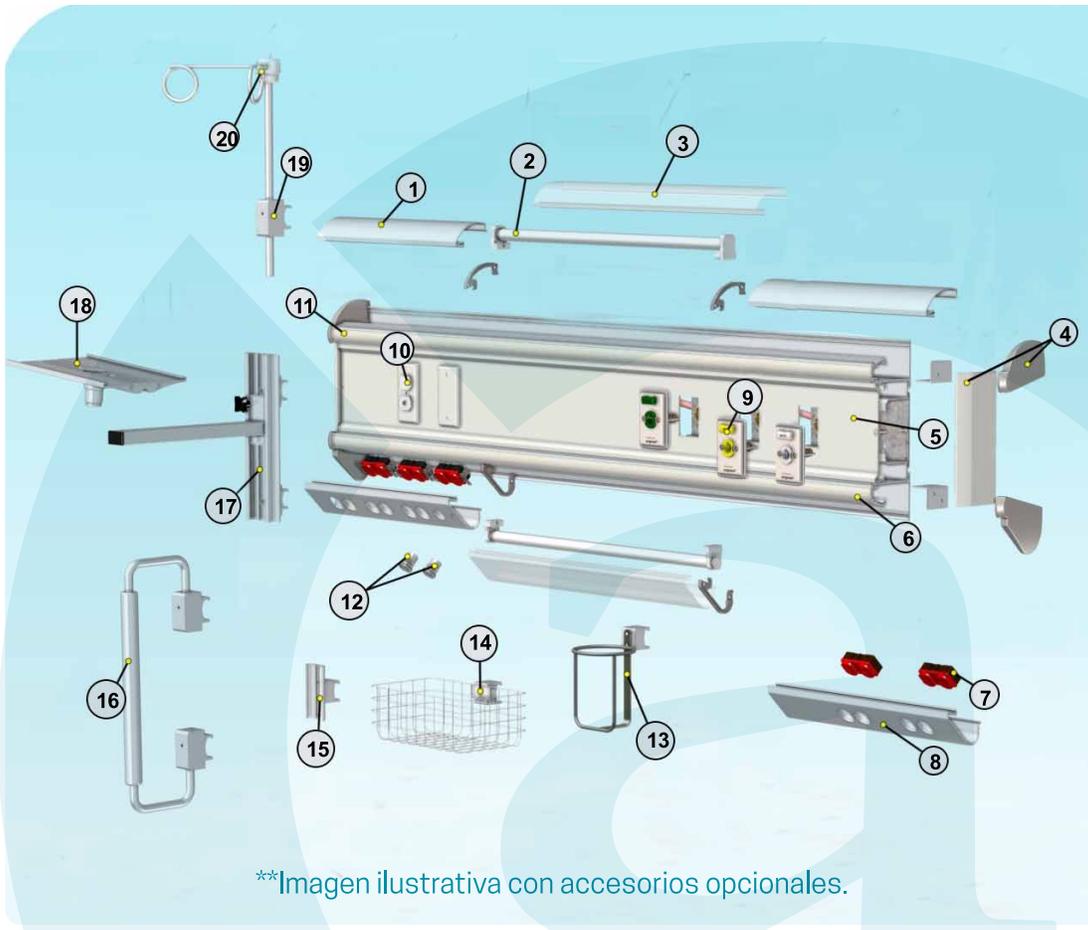

**Imagen ilustrativa con accesorios opcionales.

Item:	Descripción:
1	Tapa superior
2	Tubo led T8
3	Tapa de lámpara
4	Juego de tapas laterales
5	Panel frontal
6	Riel horizontal inferior
7	Toma eléctrica
8	Tapa inferior
9	Toma de gases medicinales
10	Toma de datos
11	Riel horizontal superior
12	Interruptores para módulos de iluminación

ACCESORIOS	
Item:	Descripción:
13	Canastilla porta frasco de 1L**
14	Canastilla multiusos**
15	Soporte tipo gancho**
16	Soporte tipo barra para bomba de infusión**
17	Riel vertical tipo GCX**
18	Soporte de monitor**
19	Grapa soporte horizontal**
20	Soporte porta venoclisis**

TOMAS ELÉCTRICAS

Puede admitir todo tipo de modelos de toma eléctrica de acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos.

TOMAS DE GASES MEDICINALES Y VACÍO MÉDICO

Montadas en la parte frontal de la consola modelo Horizon III de Arigmed, puede incluir tubería interna con tubo de cobre rígido tipo "K" o "L" (el cliente deberá especificar), el equipo permite el montaje de modelos fabricados por Arigmed y de otros fabricantes.

ACCESORIOS PARA SOPORTE Y DESLIZAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO AUXILIAR

El equipo puede incluir accesorios diversos de tipo auxiliar como canastillas médicas, soportes para venoclisis, soportes para monitor, soportes para bombas de infusión, soportes para frascos de vacío y otros accesorios afines para la atención médica al paciente. Los accesorios incluyen los elementos de sujeción y deslizamiento para montaje en los rieles verticales y horizontales de las consolas.

*Cumple con NFPA99-2015 (Apdo. 5.1.6) e ISO 11197:2016 exclusivamente a equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados totalmente en fábrica.

En caso de que el equipo haya sido suministrado de forma parcial o modificado en los componentes y sistemas de origen, GRUPO ARIGMED se deslinda de cualquier responsabilidad por riesgos de lesiones y daños a personas y propiedades. Las certificaciones quedan automáticamente anuladas.

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de Grupo Arigmed S de R.L. de C.V., cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.