SISTEMA PORTÁTIL DE SERVICIOS FICHA COMERCIAL® (

Arquitectónicos



----- Descripción

Sistema Portátil de servicios eléctricos, gases medicinales, iluminación y soportes para equipos médicos en la cabecera del paciente, con dos rieles de servicio vertical para soporte y deslizamiento de accesorios y equipos médicos auxiliares, Incluye 2 compartimentos internos fijos en estado solido (No desmontables) para la separación de las instalaciones internas.

Para salas de generales y cuidados intensivos en Hospitales de campaña.

----- Estructura

MATERIALES DE FABRICACIÓN

• Estructura: Fabricada en perfiles de extrusión especial de aluminio aleación 6063 Temple 5 cumple con ASTM B-221-02 A/A, espesor mínimo de los perfiles de 2,5 y 3 mm.


ACABADOS

- Estructura: Anodizado natural Mate a 10 micras.
- Panel Frontal:
 - 1) Lamina de Aluminio en acabado de pintura electrostática en polvo horneada (RAL).
 - 2) Panel de comprimido de madera MDF de 16 mm de espesor recubierto por la parte frontal con un laminado plástico decorativo y por la parte posterior con un laminado fenólico o lamina de aluminio como agentes retardantes al fuego.
 - **5)** Para otros materiales debe consultar a la fábrica con anticipación.

ACCESORIOS PARA SOPORTE Y DESLIZAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO AUXILIAR E ILUMINACIÓN

El equipo puede incluir accesorios diversos de tipo auxiliar como canastillas médicas, soportes para venoclisis, soportes para monitor, soportes para bombas de infusión, soportes para frascos de vacío y otros accesorios afines para la atención médica al paciente. Los accesorios incluyen los elementos de sujeción y deslizamiento para montaje en los rieles verticales de las consolas.

Se complementa con módulos de iluminación laterales y charolas para soporte.

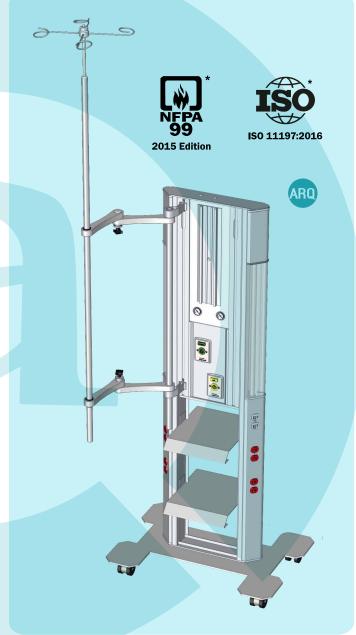

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 (Instalador de Sistemas de gases médicos) y ASME BRAZER IX (Soldador calificado en oxi-acetileno)

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagió será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.








EMA PORTÁTIL DE SERVICIOS FICHA COMERCIAL®



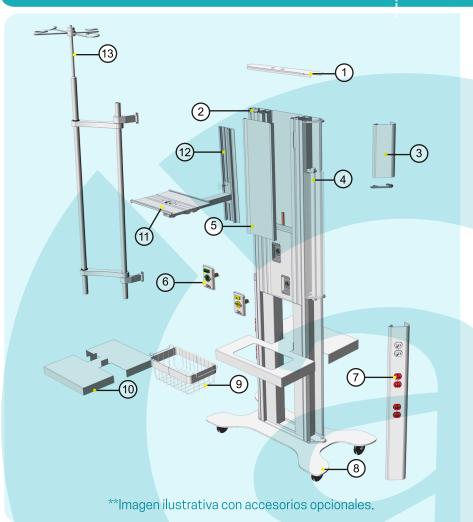

Item:	Descripción:	
1	Tapa Módulo	
2	Estructura de aluminio	
3	Tapa Lateral	
4	Módulo de iluminación láteral	
5	5 Panel frontal6 Toma de gases medicinales7 Toma eléctrica	
6		
7		
8	Base rodable	

ACCESORIOS				
lt	em:	Descripción:		
	9	Canastilla multiusos**		
	10	Charola**		
	11	Soporte para monitor universal**		
	12	Riel vertical**		
	13	Soporte para bon y porta venoclisis		



TOMAS ELÉCTRICAS

Puede admitir todo tipo de modelos de toma eléctrica de acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos.

TOMAS DE GASES MEDICINALES Y VACÍO MÉDICO

Montadas en la parte frontal, Incluye mangueras con conexiones a una presión de trabajo de 50-55psi para gases positivos y vacio de 16"Hg, las conexiones de acople serán del tipo ROSCA DISS (DIAMETER INDEXED SAFETY SYSTEM) NO INTER-CAMBIABLES DEL CÓDIGO CGA V5. El equipo permite el montaje de modelos fabricados por Arigmed y de otros fabricantes.

*Cumple con NFPA99-2015 (Apdo. 5.1.6) e ISO 11197:2016 exclusivamente a equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados totalmente en fábrica.

En caso de que el equipo haya sido suministrado de forma parcial o modificado en los componentes y sistemas de origen, GRUPO ARIGMED se deslinda de cualquier responsabilidad por riesgos de lesiones y daños a personas y propiedades. Las certificaciones quedan automáticamente anuladas.

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de Grupo Arigmed S de R,L. de C.V., cualquier tipo de copia, similitud o plagió será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.





