

Cabecero Horizontal para Paciente

Modelo 4V

ficha
técnica
Arquitectónicos



arg

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

● **Estructura (Ducto Base)** : Fabricada en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con **ASTM B221-02/AA**.

● **Paneles frontales (2), inferior y superior**: Fabricados en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, autosoportados a presión (eclipsables), cumple con **ASTM B221-02/AA**.

Terminados y Configuraciones:

● **Estructura (Ducto Base)**: Anodizado natural Mate o Pintura electrostática en polvo horneada con opción en anti-bacterial color blanco.

● **Paneles Frontales (2), Inferior y Superior**:

1) Perfiles de aluminio con acabado en pintura electrostática en polvo horneada o sublimado de imitación madera, con opción en anti-bacterial color blanco.

● **Configuraciones**:

1) Longitudes variables y para una o varias camas dependiendo de la necesidades del usuario o del proyecto. Las Dimensiones del ducto base son 0.40m de altura x 0.10m de profundidad.

Módulo de Iluminación para Paciente:

Lamparas LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50hz para el **módulo superior** (iluminación de ambiente) y el **módulo inferior** (iluminación de lectura).

Difusores para lamparas tipo panel autosoportados a presión (eclipsables) fabricados en perfiles de extrusión especial de policarbonato transparente con guías luminosas.

Incluye los interruptores eléctricos con certificado U.L. para controlar el encendido y apagado del módulo de iluminación para paciente.



Para Servicio de 1 o varias camas.

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 y ASME BRAZER IX
(Instalador de Sistemas de gases médicos y Soldador calificado en oxi-acetileno)

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com



Grupo Arigmed Gases Medicinales



ventasmx@arigmed.com



+52-779-7969-370



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015



VER. 2


Cabecero Horizontal para Paciente

Modelo 4V

ficha
técnica
Arquitectónicos



Corte Lateral.

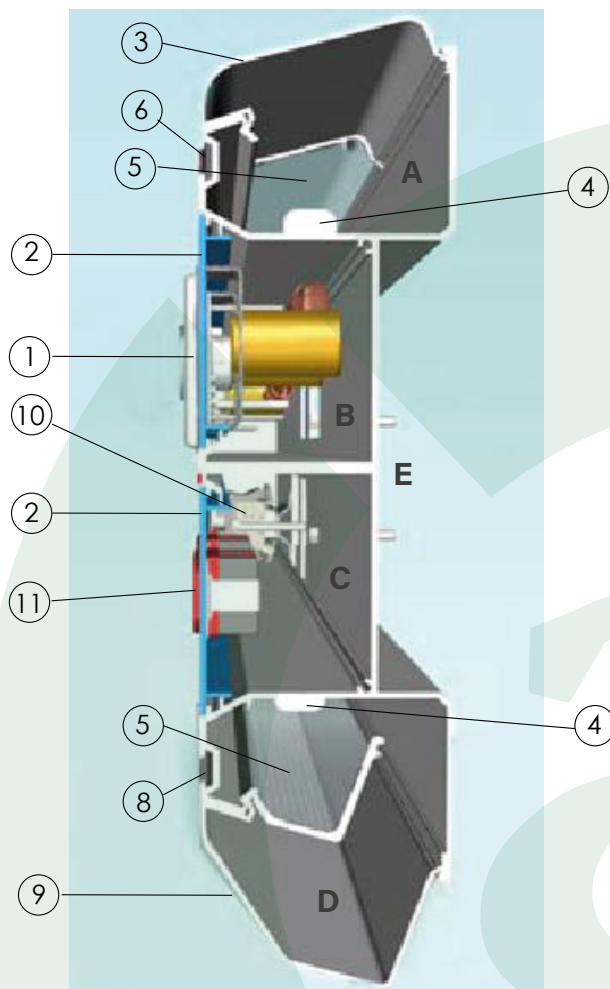

item	Descripción
1	Salidas de gases medicinales
2	Panel frontal de aluminio
3	Tapa superior de aluminio
4	Lampara LED T8
5	Difusor para lámpara
6	Porta etiqueta superior
7	Tapas laterales de Aluminio
8	Porta etiqueta inferior
9	Tapa inferior de aluminio
10	Apagador de balancín doble
11	Salida Eléctrica

Vías Internas	
A	Vía Superior iluminación
B	Vía intermedia Gases medicinales
C	Vía intermedia eléct. voz, datos
D	Vía Inferior iluminación, eléct. voz, datos
E	Vía posterior tuberías y cables



Vista Frontal

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas eléctricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos **ARIGMED** y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección frontal del cabecero de paciente; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

Canales Internos para Instalaciones: Sujeción de Paneles de Servicio:

Con 4 canales o vías internas frontales + 1 vía posterior (5 vías totales), para alojar conductores de instalaciones eléctricas, voz y datos, tuberías de gases medicinales, circuitos, lámparas y accesorios de iluminación, etc, en canalizaciones o vías en estado sólido (sin separadores des-montables).

Las vías internas están incluidas en la construcción del perfil estructural de aluminio del cabecero de paciente.

Paneles de servicio frontal, superior e inferior son auto-soportados a presión (eclipsables), **libres de tornillería**.

Certificados:

ISO 11197:2019 Unidades Médicas de Suministro



*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteraciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com Grupo Arigmed Gases Medicinales ventasmx@arigmed.com +52-779-7969-370



VER. 2