

Cabecero Vertical para Paciente

Modelo Vertical III

ficha
técnica
Arquitectónicos



arg



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

● **Estructura:** Fabricada en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, con paneles autosoportados a presión (eclipsables) para los compartimientos laterales de instalaciones, cumple con **ASTM B221-02/AA**

● **Rieles de servicio verticales:** De 2 correderas verticales (1 por cada lado) para soporte y deslizamiento de equipo medico auxiliar, integrados a la construcción de la estructura de los perfiles de aluminio.

● **Paneles de frontales de acceso:** Sistema de paneles frontales registrables fabricados en:

1) Lámina de aluminio calibre 18 con acabado en pintura eletrostática en polvo horneada, pegada en frío sobre un respaldo de panel comprimido de madera MDF de 15mm de espesor y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura de la pared hospitalaria.

2) Lámina de aluminio calibre 16 con acabado en pintura eletrostática en polvo horneada y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura de la pared hospitalaria.

3) Panel de comprimido de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con un laminado plástico decorativo y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura de la pared hospitalaria.

Módulo de Iluminación Lateral para Paciente:

Lamparas LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50hz.

Difusores para lámparas autosoportados a presión (eclipsables) fabricados en perfiles de extrusión especial de policarbonato transparente con guías luminosas.

Incluye los interruptores eléctricos con certificado U.L. para controlar el encendido y apagado del módulo de iluminación lateral.

Configuraciones:

Configuración para servicio de 1 cama y 2 camas como máximo, el diseño del equipo será sobre previa especificación y análisis de la guía mecánica de dimensiones.

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 y ASME BRAZER IX
(Instalador de Sistemas de gases médicos y Soldador calificado en oxi-acetileno)

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com



Grupo Arigmed Gases Medicinales



ventasmx@arigmed.com



+52-779-7969-370



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 900002844




VER. 2

Cabecero Vertical para Paciente

Modelo Vertical III

ficha
técnica
Arquitectónicos

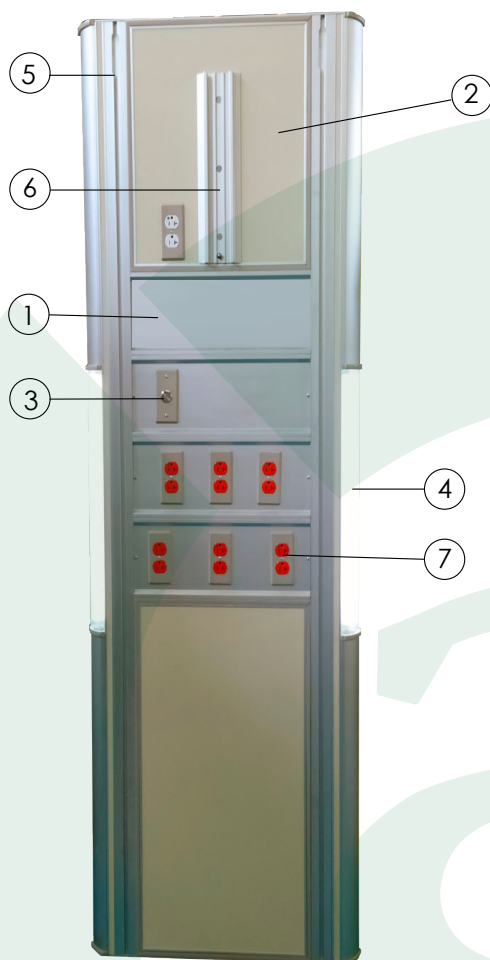

Ejemplos:

item	Descripción
1	Sección para gases medicinales
2	Paneles frontales
3	Apagador
4	Módulo de iluminación de paciente
5	Rieles verticales para accesorios
6	Riel vertical para monitor
7	Salidas eléctricas



Certificados:



Under Writers Laboratories

ISO 11197:2019

Unidades Médicas de Suministro

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas eléctricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos **ARIGMED** y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección frontal del cabecero de paciente; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

Canales Internos para Instalaciones: Accesorios para rieles verticales:

De 2 vías internas o ductos laterales aislados en estado sólido (no desmontables) para la conducción de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos.

Sección central con compartimientos aislados para alojar las salidas de gases medicinales y cualquier otro dispositivo requerido para el servicio.

Soportes para:

*Frascos de vacío, * Venoclisis, * Monitores de paciente, * Bombas de infusión, * Identificadores y soportes para notas médicas, * Canastillas para cables y medicamentos, *Montaje de localizadores de cama, *Lamparas de paciente, *Lamparas de exploración, *Esfigmomanómetros, etc.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteraciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com



Grupo Arigmed Gases Medicinales



ventasmx@arigmed.com



+52-779-7969-370



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 80003044



VER. 2