

Pilar Técnico (columna de piso a techo)

Modelo Pilartech

ficha
técnica
Arquitectónicos



arg



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

● **Estructura:** Fabricado en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con **ASTM B221-02/AA**.

● **Rieles de servicio verticales:** De 12 correderas verticales para soporte y deslizamiento de equipo medico auxiliar, integrados a la construcción de la estructura de los perfiles de aluminio.

● **Paneles de frontales de acceso:** Sistema de paneles frontales registrables fabricados en:

1) Lámina de aluminio calibre 18 con acabado en pintura eletrostática en polvo horneada pegada en frío sobre un respaldo de panel comprimido de madera MDF de 15mm de espesor, y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura del pilar técnico.

2) Lámina de aluminio calibre 16 con acabado en pintura eletrostática en polvo horneada, y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura del pilar técnico.

3) Panel de comprimido de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con un laminado plástico decorativo, y enmarcado con un perfil de aluminio para acoplar con la estructura de la pilar técnico.

Configuraciones:

Diseños y medidas de configuración para servicio a 1 cama o a varias camas, de 2, 3, 4 caras de servicio en formas rectangulares, cuadradas y triangulares, se puede configurar como columna o isla con instalaciones para dividir espacios y áreas con servicios en todas las caras del pilar técnico.

Se requiere del análisis de la guía mecánica de configuración para este tipo de equipos.



Pilar Triángular para servicio a dos camas

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 y ASME BRAZER IX
(Instalador de Sistemas de gases médicos y Soldador calificado en oxi-acetileno)

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com



Grupo Arigmed Gases Medicinales



ventasmx@arigmed.com



+52-779-7969-370



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 900020244




VER. 2

Pilar Técnico (columna de piso a techo) Modelo Pilartech

ficha
técnica
Arquitectónicos



Ejemplos:

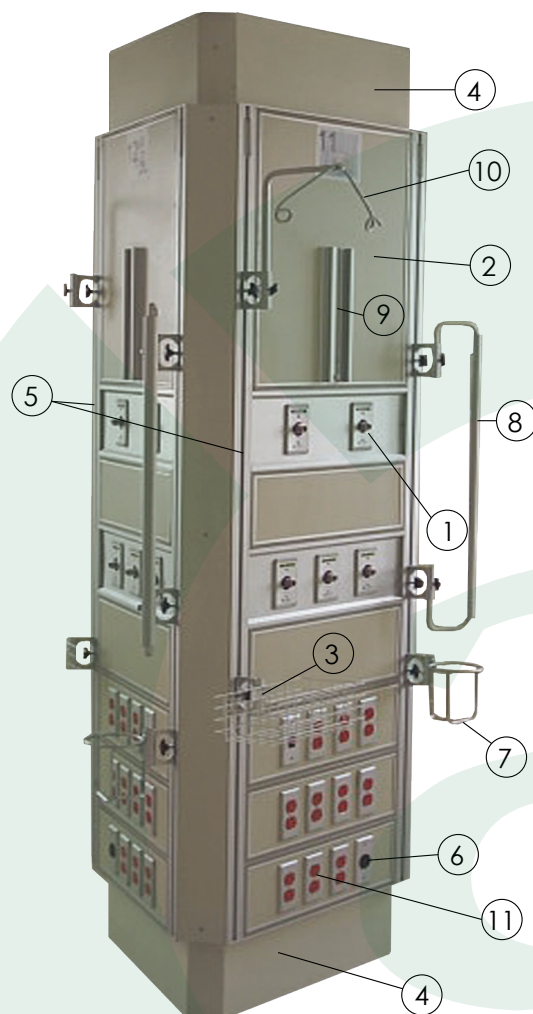

item	Descripción
1	Salidas de gases medicinales
2	Paneles frontales
3	Canastilla auxiliar de soporte
4	Base y capitel metálico
5	Rieles verticales
6	Salida eléctrica 220vac
7	Soporte para canastilla portafrasco
8	Soportes para bomba de infusión
9	Soporte de monitor y riel vertical
10	Soporte para venoclisis
11	Salidas eléctricas 110vac



Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del pilar técnico.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos **ARIGMED** y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección de servicio frontal del pilar técnico; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

Canales Internos para Instalaciones: Accesorios para rieles verticales:

Compartimientos aislados para gases medicinales, iluminación, sistemas eléctricos, voz y datos, etc, sin posibilidad de combinarse o compartir las vías internas de montaje de los dispositivos de salida.

Incluye tubería interna de acero galvanizado de 3/4" para conducir los cables de energía y datos hasta los compartimientos aislados de cada especialidad.

Soportes para:

*Frascos de vacío, * Venoclisis, * Monitores de paciente, * Bombas de infusión, * Identificadores y soportes para notas médicas, * Canastillas para cables y medicamentos, *Lamparas de paciente, *Lamparas de exploración, *Esfigmomanómetros, etc.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 1197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO
www.arigmed.com Grupo Arigmed Gases Medicinales ventasmx@arigmed.com +52-779-7969-370



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 80003044



VER. 2