




arigmed MC70+M24

Salida de Gas Médico



+52 (779) 79-69-370
ventasmx@arigmed.com
www.arigmed.com

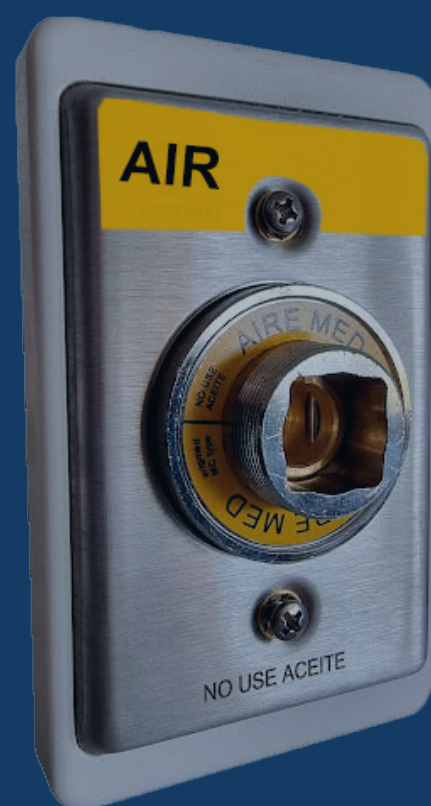

Especificaciones:

****Salida de Gas Médico MC70+M24 USA – ARIGMED****

1. Identificación:

- Fabricante / Marca: **ARIGMED**
- Modelo / Enchufe: **MC70+M24 USA**
- Variaciones disponibles: **Montaje en cabecero médico de paciente, ambulancias, para muro sobrepuesto y sistemas MRI.**
- Producto: **Salida de gas médico con conexión de acople rápido estándar MC70 SUECO+rosca M24 para candado de equipo secundario.**

2. Descripción:

Salida de gas médico diseñada para el suministro seguro y estandarizado de los gases medicinales en instalaciones hospitalarias; Distribuye el gas hacia los equipos secundarios utilizados en el soporte de vida del paciente, mediante un sistema de acople rápido con candado roscado M24 para equipo secundario y válvula check de cierre automático que evita fugas y garantiza una operación segura, sólo para uso en México.

****Componentes incluidos:****

- Válvula primaria (*Latch Valve*)
- Válvula secundaria (*Rough-In*)
- Marco de muro y para cabecero médico de paciente (*Trim Plate*)

****Aplicación:** Exclusivo para sistemas de gases medicinales grado médico de uso hospitalario**.

3. Especificaciones técnicas:

****Dimensiones:****

- Válvula primaria: 9.5 × 6 × 8.5 cm
- Válvula secundaria: 11.5 × 12.5 × 5.5 cm

****Gases disponibles:****

- oxígeno, aire médico, vacío/wagd, óxido nitroso, dióxido de carbono.

****Materiales de fabricación:****

- Acero inoxidable, latón, cobre, zamak, acero galvanizado e inyección de plástico ABS.

****Desempeño:****

- Flujo de 240 LPM @ 50–55 PSI en presión positiva
- Flujo de 94 LPM en extracción
- **100 PSI de presión máxima para todos los gases.**

****Compatibilidad:****

- Estándar ****MC70 SUECO**** (Entrada rápida escalonada no intercambiable).

4. Cumplimiento normativo y certificaciones

***Normas aplicables:** NFPA99, ASTM B819, SS EN 8752430, SS EN ISO 9170-1

***Declaración de cumplimiento:**

El producto cumple con los requisitos aplicables para sistemas de distribución de gases medicinales establecidos por el código NFPA99 y estándares de conexión tipo MC70 SUECO para acople rápido y de entrada escalonada no intercambiable.

5. Información logística

***Contenido del empaque:**

Válvula primaria, válvula secundaria y marco de muro o para cabecero médico de paciente.

***Condiciones de almacenamiento:**

Lugar seco, temperatura máxima 45°C, evitar la exposición a cloro y ambientes de alta humedad (tropicales).

***Condiciones de transporte:**

No estibar, No golpear, No maltratar.

6. Instalación, operación y mantenimiento

***Instalación:**

Debe realizarse conforme a los lineamientos de código NFPA99 y del manual de uso por parte del fabricante.

***Operación:**

El usuario debe consultar el manual de uso del fabricante.

***Mantenimiento preventivo:**

Cambio de kit de sellos en la válvula primaria y secundaria cada 24 meses como mínimo.

***Vida útil estimada:** 8–15 años en condiciones normales de uso.

7. Garantía y servicio.

***Garantía:** 2 años contra defectos de fabricación.

***Exclusiones:** Las establecidas en las condiciones de uso por parte del fabricante.

***Reclamaciones:** Consulte las notas de venta vigentes.

Fabricado por **Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V.**

Calle 16 de enero de 1869 No.6, Huitzila,

Tizayuca Estado de Hidalgo, México 43820.

