




# arigmed Frasco para Vacío de 1 y 2 L en Vidrio Equipo Secundario



+52 (779) 79-69-370  
ventasmx@arigmed.com  
www.arigmed.com

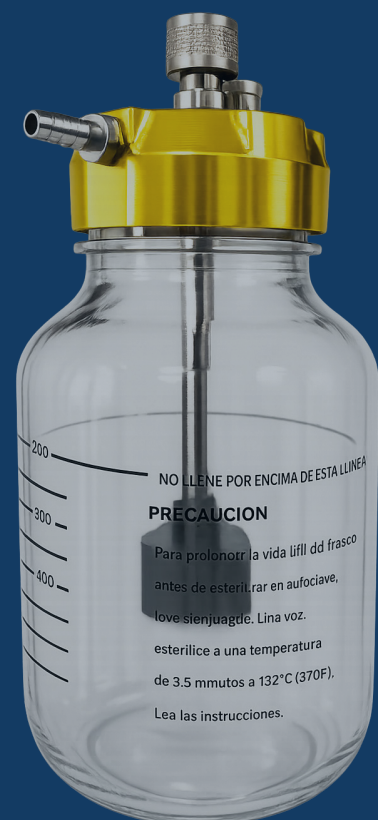

NO LLENE POR ENCIMA DE ESTA LINEA

**PRECAUCION**

Para prolongar la vida útil del frasco antes de esterilizar en autoclave, lave bien y agite. Lave a voz.

esterilice a una temperatura de 3.5 minutos a 132°C (370°F).

Lea las instrucciones.

# Especificaciones:

## 1. Identificación:

- Fabricante / Marca: ARIGMED
- Capacidad: 1 y 2 litros
- Producto: Frasco recolector de secreciones para paciente, de vidrio con capacidad de 1 y 2 Litros.

## 2. Descripción:

Frasco para recolección de secreciones para paciente con capacidad de 1 y 2 litros y con dispositivo anti-derrame, el frasco esta fabricado en "vidrio", y apto para limpieza con vapor.

### \*\*Componentes incluidos:\*\*

- Tapa con rosca tipo "MASON" fabricada en inyección de termoplástico de ABS de alta resistencia al impacto, incluye un dispositivo de obstrucción tipo flotador anti-derrames, cuando el llenado del frasco se encuentre a su límite máximo.

- La tapa es compatible para el frasco de 1 y 2 litros indistintamente.

\*\*Aplicación: Para la recolección de las secreciones del paciente en todas las áreas de servicio médico.

\*\*Flujo: Vacío Médico Directo.

\*\*Uso: Exclusivo Médico.

## 3. Especificaciones técnicas:

- Escalas disponibles: 1 y 2 LITROS
- Precisión:  $\pm 1\%$
- Apto para limpieza en vapor (autoclave)

\*\*sólo retire los sellos de la tapa mason para esta operación, y limpielos por aparte.\*\*

### \*\*Componente\*\*

### \*\*Material\*\*

Frasco	Vidrio
Tapa	Plástico de inyección ABS
Conexiones	Latón con acabado de cromo
Sellos	Libres de látex

- Tipo de Roscado:

\*\*Rosca Mason\*\*

## 4. Cumplimiento normativo y certificaciones

\*Normas aplicables: NFPA99,FDA

### \*Declaración de cumplimiento:

El producto cumple con los requisitos aplicables para sistemas de distribución de gases medicinales y vacío médico quirúrgico establecidos por el código NFPA99.

## 5. Información logística

### \*Contenido del empaque:

Frasco de vidrio de 1 o 2 Litros con tapa roscada.

### \*Condiciones de almacenamiento:

Lugar seco, temperatura máxima 45°C, evitar la exposición a cloro y ambientes de alta humedad (tropicales).

### \*Condiciones de transporte:

No estibar, No golpear, No maltratar, de Naturaleza frágil.

## 6. Instalación, operación y mantenimiento

### \*Instalación:

Debe realizarse conforme a los lineamientos del manual de uso por parte del fabricante.

### \*Operación:

El usuario debe consultar el manual de uso del fabricante.

### \*Mantenimiento preventivo:

Cambio de kit de sellos en la tapa cada 24 meses como mínimo.

\*Vida útil estimada: 3 - 5 años en condiciones normales de uso, si el frasco presenta fracturas, deberá remplazarlo de inmediato.

## 7. Garantía y servicio.

\*Garantía: 1 año contra defectos de fabricación.

\*Exclusiones: Las establecidas en las condiciones de uso por parte del fabricante.

\*Reclamaciones: Consulte las notas de venta vigentes.

Fabricado por **Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V.**

Calle 16 de enero de 1869 No.6, Huitzila,

Tizayuca Estado de Hidalgo, México 43820.

