



Materiales de Fabricación:

- Estructura (Ducto Base) : Fabricada en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA.
- Paneles frontales (2), inferior y superior: Fabricados en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, autosoportados a presión (eclipsables), cumple con ASTM B221-02/AA.
- Rieles de Servicio superior e inferior: Fabricados en perfil de aluminio para soporte y deslizamiento de equipo medico auxiliar, integrados al ducto base del cabecero horizontal.

Módulo de Iluminación para Paciente:

Lamparas LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50htz para el **módulo superior** (iluminación de ambiente) y el **módulo inferior** (iluminación de lectura). Difusores para lamparas tipo panel autosoportados a presión (eclipsables) fabricados en perfiles de extrusión especial de policarbonato transparente con guías luminosas. Incluye los interruptores eléctricos con certificado U.L. para controlar el encendido y apagado del módulo de iluminación para paciente.

Terminados y Configuraciones:


- Estructura (Ducto Base): Anodizado natural Mate o Pintura electrostática en polvo horneada con opción en anti-bacterial color blanco.
- Paneles Frontales, Inferior y Superior:
 - 1) Perfiles de aluminio con acabado en pintura eletrostática en polvo horneada o sublimado de imitación madera, con opción en anti-bacterial color blanco.
- Configuraciones:
 - 1) Longitudes variables y para una o varias camas dependiendo de la necesidades del usuario o del proyecto. Las Dimensiones del ducto base son 0.40m de altura x 0.10m de profundidad.

Certificados:



Para Servicio de 1 o varias camas.

Corte Lateral.

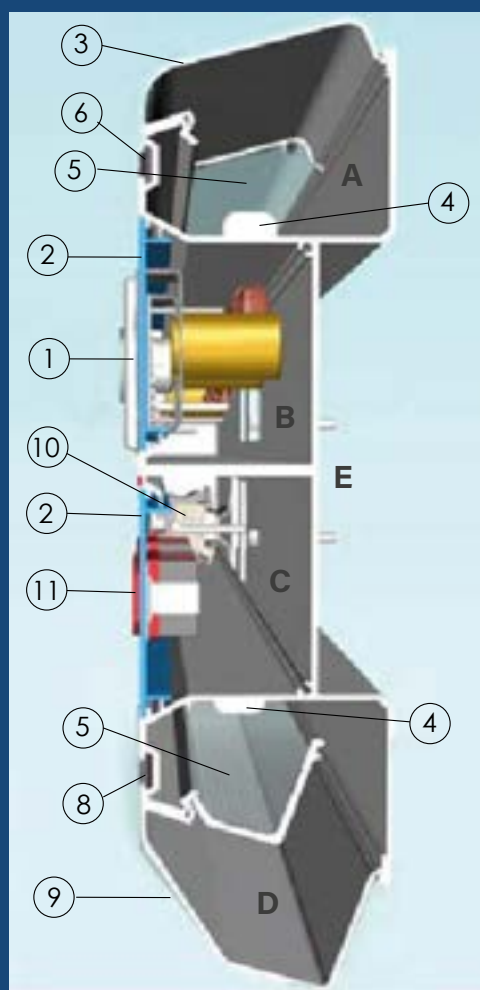

item	Descripción
1	Salidas de gases medicinales
2	Panel frontal de aluminio
3	Tapa superior de aluminio
4	Lampara LED T8
5	Difusor para lámpara
6	Riel superior
7	Tapas laterales de Aluminio
8	Riel Inferior
9	Tapa inferior de aluminio
10	Apagador de balancín doble
11	Salida Eléctrica

Vías Internas	
A	Vía Superior iluminación
B	Vía intermedia Gases medicinales
C	Vía intermedia eléct. voz, datos
D	Vía Inferior iluminación, eléct. voz, datos
E	Vía posterior tuberías y cables

Vista Isométrica Superior.



Vista Inferior

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos ARIGMED y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección frontal del cabecero de paciente; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

Canales Internos para Instalaciones:

Con 4 canales o vías internas y 1 canal posterior para alojar conductores de instalaciones eléctricas, voz y datos, tuberías de gases medicinales, circuitos, lamparas y accesorios de iluminación, etc, en canalizaciones o vías en estado sólido (sin separadores des-montables).

Las vías internas están incluidas en la construcción del perfil estructural de aluminio del cabecero de paciente.

Sujeción de Paneles de Servicio:

Paneles de servicio frontal, superior e inferior son autosoportados a presión (eclipsables), libres de tornillería.

Accesorios para Rieles:

Soportes para: *Frascos de vacío, * Venoclisis, * Monitores de paciente, * Bombas de infusión, * Identificadores y notas médicas, * Canastillas para cables y medicamentos, etc.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradcciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.