



## Materiales de Fabricación:

- Estructura (Ducto Base) : Fabricada en perfil de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA.
- Panel frontal: Fabricado en una base de aglomerado de madera **MDF** de 16mm de espesor con motivo infantil impreso sobre acrílico transparente y pagado en frío en alta presión.
- Tapas laterales: Fabricadas en aluminio de fundición en acabado de pintura electrostática en polvo horneada.
- Tapas de servicio inferior y superior: Fabricadas en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA, eclipsables (sujetas a presión).

## Configuraciones:

### ● Configuraciones:

- 1) Longitud de 1.00 m de longitud para servicio exclusivo a 1 cama. Las Dimensiones del ducto base son 0.40m de altura x 0.10m de profundidad.

## Sujeción de Paneles de Servicio:

Paneles de servicio frontal, superior e inferior son autosoportados a presión (eclipsables), libres de tornillería.

## Módulo de Iluminación para Paciente:

Lámparas LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50hz para el **módulo superior** (iluminación de ambiente) y el **módulo inferior** (iluminación de lectura).

Difusores para lámparas tipo panel autosoportados a presión (eclipsables) fabricados en perfiles de extrusión especial de aluminio con acrílico color blanco.

Incluye los interruptores eléctricos con certificado U.L. para controlar el encendido y apagado del módulo de iluminación para paciente.





## Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.


## Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos ARIGMED y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección frontal del cabecero de paciente; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

## Canales Internos para Instalaciones:

Con 4 canales o vías internas y 1 canal posterior para alojar conductores de instalaciones eléctricas, voz y datos, tuberías de gases medicinales, circuitos, lamparas y accesorios de iluminación, etc, en canalizaciones o vías en estado sólido (sin separadores des-montables).

Las vías internas estan incluídas en la construcción del perfil estructural de aluminio del cabecero de paciente.

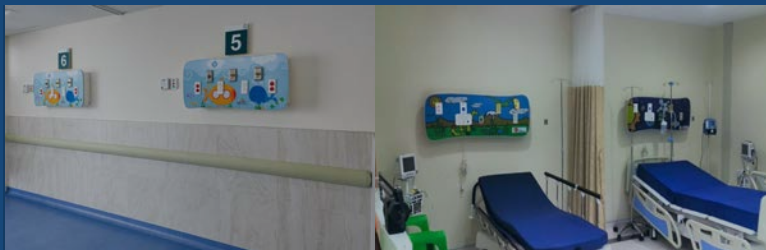

## Diseños:



Dinosaurios



Astronauta



Hadas



Mariposas



Sabána



Submarino

Nota:

Los diseños presentados son propiedad intelectual de Grupo Arigmed y forman parte de nuestro catálogo de diseños estandarizados. Por respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual de terceros, no se reproducirán diseños protegidos sin la autorización correspondiente. Únicamente podrán elaborarse diseños distintos cuando el titular de los derechos autorice expresamente su reproducción o cuando el cliente acredite ser el autor o titular de los derechos sobre dichos diseños.

\*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradcciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.