



Materiales de Fabricación:

● Estructura: Fabricada en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA, de 2.5mm a 3mm de espesor.

● Sistemas:

1. Lámparas de iluminación: Tipo LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50hz.
2. Apagadores: Módulo superior con apagador de cadena o con opción a cordón de extensión de espiral.
3. Apagadores: Módulo inferior con apagador tipo balancín.
4. Tapas laterales: Fabricadas en inyección de plástico ABS de alta resistencia en colores gris, beige o blanco.
5. Tapas Eclipsables: Fabricadas en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA, de 2.5mm de espesor.
6. Difusores lumínicos: Fabricados en perfil especial de policarbonato transparente de alta resistencia con sistema de soporte eclipsable (a presión).

Arnés Eléctrico:

Conformado por conductores eléctricos (cables) individuales THW 90° anti flama AWG 14-10, tensión eléctrica 600v con certificado UL marca condumex o similar en calidad, para otras especificaciones consulte a la fábrica por anticipado.

● Dimensión longitudinal:


** DE 1.00m estándar **

Para otras dimensiones de longitud deberá consultar a la fábrica por anticipado.





Iluminación de ambiente

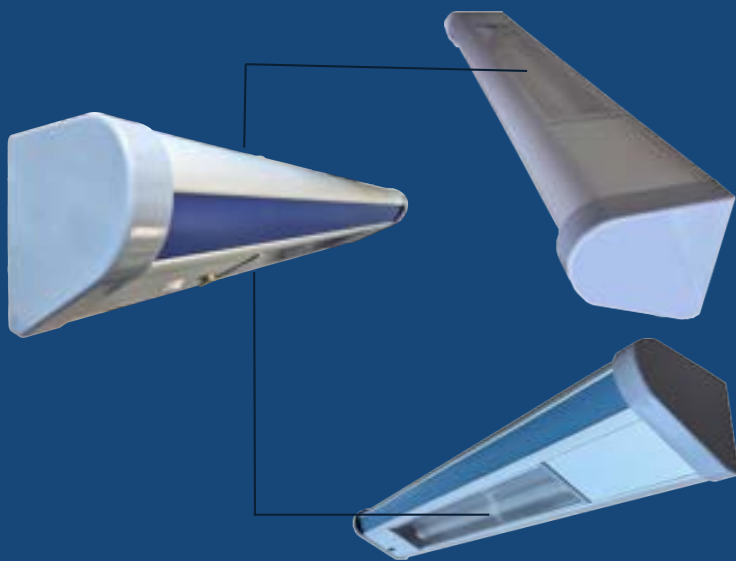


Iluminación de lectura

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos de lampara de cabecera de paciente.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.

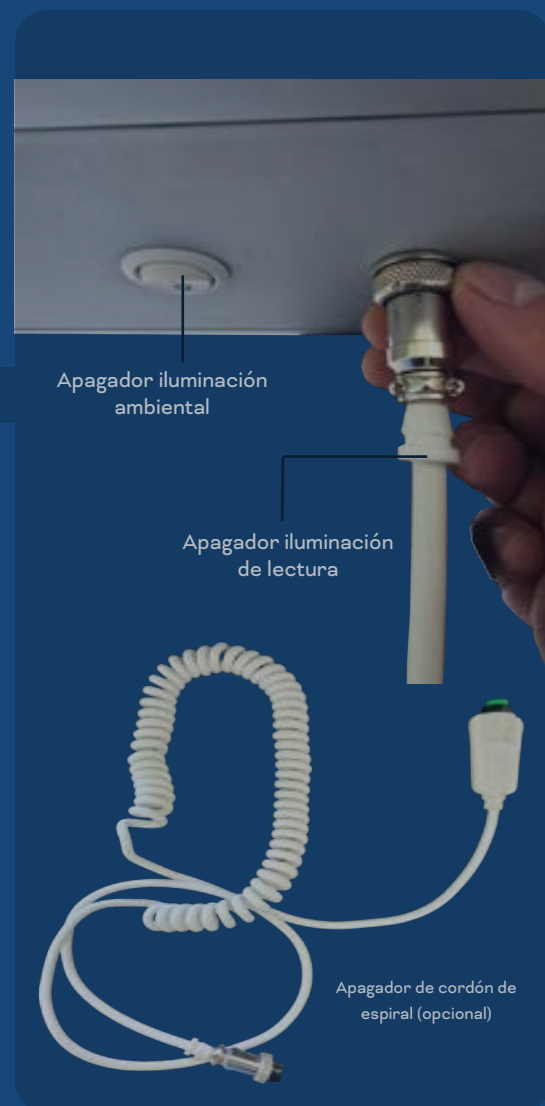

Apagador iluminación ambiental

Apagador iluminación de lectura

Apagador de cordón de espiral (opcional)