





arigmed MRI Salidas de Gases Médicos

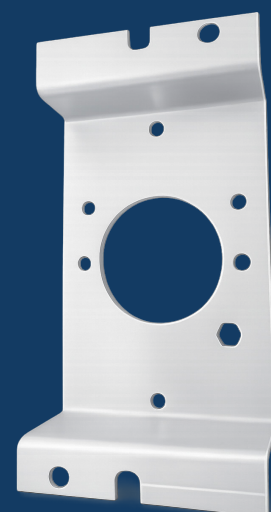

+52 (779) 79-69-370
ventasmx@arigmed.com
www.arigmed.com

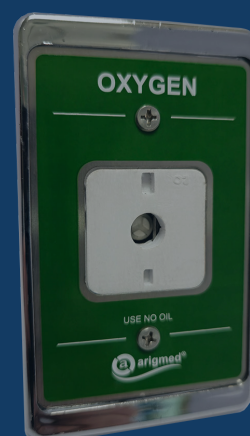

Placa de Montaje — Aluminio Anodizado Natural

Especificaciones:

****Salida de Gas Médico MRI – ARIGMED****

1. Identificación:

- Fabricante / Marca: **ARIGMED**
- Modelo / Enchufe: **LOS FABRICADOS POR ARIGMED**
- Variaciones disponibles: **Montaje para sistemas MRI.**
- Producto: **Salida de gas médico compatible con sistemas MRI.**

2. Descripción:

Salida de gas médico diseñada para el suministro seguro y estandarizado de los gases medicinales en sistemas MRI.

Distribuye el gas hacia los equipos secundarios utilizados en el soporte de vida del paciente, mediante varios sistemas de acople, con válvula check de cierre automático que evita fugas y garantiza una operación segura.

****Componentes incluidos:****

- Válvula primaria (*Latch Valve*)
- Válvula secundaria (*Rough-In*)
- Marco de muro y para cabecero médico de paciente (*Trim Plate*)

****Aplicación:** Exclusivo para sistemas de gases medicinales grado médico en MRI**.

3. Especificaciones técnicas:

****Dimensiones:****

- Válvula primaria: 9.5 × 6 × 8.5 cm
- Válvula secundaria: 11.5 × 12.5 × 5.5 cm

****Gases disponibles:****

- Según el tipo de enchufe o acoples fabricados por arigmed.

****Materiales de fabricación NO FERROSOS:****

- Aluminio, latón, cobre, zamak y plásticos ABS.

****Desempeño:****

- Flujo de 240 LPM @ 50–55 PSI en presión positiva
- Flujo de 94 LPM en extracción
- **100 PSI de presión máxima para todos los gases.**

****Compatibilidad:****

- Según el tipo de enchufe o acoples fabricados por arigmed.

4. Cumplimiento normativo y certificaciones

***Normas aplicables:** NFPA99, ASTM B819

***Declaración de cumplimiento:**

El producto cumple con los requisitos aplicables para sistemas de distribución de gases medicinales establecidos por el código NFPA99 y estándares de conexión fabricados por arigmed y compatibles con sistemas MRI.

5. Información logística

***Contenido del empaque:**

Válvula primaria, válvula secundaria y marco de muro.

***Condiciones de almacenamiento:**

Lugar seco, temperatura máxima 45°C, evitar la exposición a cloro y ambientes de alta humedad (tropicales).

***Condiciones de transporte:**

No estibar, No golpear, No maltratar.

6. Instalación, operación y mantenimiento

***Instalación:**

Debe realizarse conforme a los lineamientos de código NFPA99 y del manual de uso por parte del fabricante.

***Operación:**

El usuario debe consultar el manual de uso del fabricante.

***Mantenimiento preventivo:**

Cambio de kit de sellos en la válvula primaria y secundaria cada 24 meses como mínimo.

***Vida útil estimada:** 8–15 años en condiciones normales de uso.

7. Garantía y servicio.

***Garantía:** 2 años contra defectos de fabricación.

***Exclusiones:** Las establecidas en las condiciones de uso por parte del fabricante.

***Reclamaciones:** Consulte las notas de venta vigentes.

Fabricado por **Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V.**

Calle 16 de enero de 1869 No.6, Huitzila,
Tizayuca Estado de Hidalgo, México 43820.

